


ENTRETIEN DU TIRE-LAIT



Nouveau protocole
Réunion de service
3 octobre 2014

Géraldine Blondel
Béatrice Mestdagh

problématique

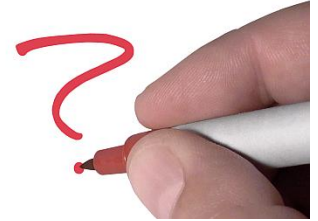

Depuis 2005, la stérilisation à froid n'est plus recommandée (Afssaps)

1) Abandon par le service de la stérilisation à froid pour les bébés à terme sans problème depuis 2011

2) Suite aux travaux du réseau Ombrel, décision d'abandonner également la stérilisation à froid pour les BBT et les enfants fragiles (KG) en octobre 2014

- Avec hygiène +++ en contrepartie
- Choix de donner un nouveau kit stérile/24h
 - Choix arbitraire
 - Choix pris en concertation avec la néonatalogie et le lactarium

Pour le bébé transféré ou fragile choix d'un tire-lait de chez Medela

Symphony




Lactina



Kits de tire-lait s'adaptant sur les tire lait Medela

Beldico

Medela

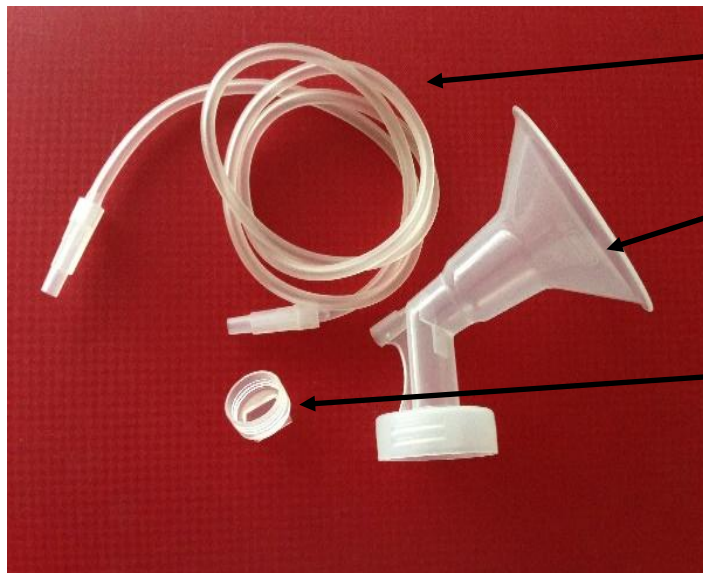

Cordon

Téterelle

Valve

Membrane



Kit stérile

Kit propre

Matériel à fournir par l'AS ADP avant le démarrage du tire lait



Pour la première utilisation du tire-lait et une fois par jour

BBT ou fragile



Autres bébés



Pour la première utilisation du tire-lait et une fois par jour

BBT ou fragile

- 2 kits stériles type Beldico*
- 1 plateau en cellulose
- 8 flacons de conservation qui doivent être stériles

Pas d'utilisation du kit Médéla* livré avec le tire-lait
(réservé au domicile, car stérilisation impossible à l'hôpital)

Autres bébés

- ϕ
- 1 plateau en cellulose
- 8 flacons de conservation (stériles ou pas)

Utilisation du kit livré avec le TL, type Medela
Si TL prêté, fournir un kit Beldico pour toute la durée du séjour*

Adapter le contenant à la quantité de lait recueillie

BBT ou fragile



Autres bébés



Hygiène

Hygiène de la mère



Douche quotidienne

Changer de sous vêtements si souillés (ou 1 fois/jour)

Hygiène des mains + SHA avant et après chaque manipulation du tire-lait et de ses accessoires (concerne la mère et le personnel soignant)



Entretien de l'environnement

Par la mère :

Nettoyage de la paillasse avant chaque utilisation avec un détergent désinfectant type Surfa-Safe*

Entretien quotidien du bloc moteur, du piston et du tuyau en silicone avec un essuie-tout légèrement imbibé de détergent-désinfectant type Surfa-Safe*.

Par l'AS – ADP :

Entretien quotidien de la vasque, de la paillasse et de l'adaptable avec du détergent-désinfectant, type Surfa-Safe* (cf feuille de traçabilité)